

## Lanaform Beauty Light

### Návod k obsluze

Děkujeme vám za zakoupení světla proti vráskám a pigmentovým skvrnám Lanaform® Beauty Light. Beauty Light, váš nový partner pro krásu, využívá techniku pulzního světla. Toto světlo je neinvazivní a netepečné. Díky různým barvám světla o různých vlnových délkách má blahodárné účinky na kůži.

Toto zařízení má dvě hlavy, z nichž každá má specifické vlastnosti:

**Infračervené a červené světlo:** Toto světlo je zvláště účinné pro podporu a obnovu buněk a zejména obnovu fibroblastů, které produkují kolagen a elastin. To tak pomáhá snižovat dopady stárnutí kůže, pleť bude jasnější a zářivější. Vrásky a jemné linky jsou vymazány, vaše pokožka je hladší a pružnější a vaše pleť je zářivější.

Upozornění: Vzhledem k vysoké intenzitě červeného světla svítí během použití vždy pouze část diod.


**Zelené světlo:** příznivě působí na skvrny způsobené hyperpigmentací. Redukuje stárnutí skvrn.

Klinická studie provedená s přístrojem Beauty Light prokázala následující výsledky:

- 90% \* žen dotazovaných uvedlo, že mají méně vrásek a jemných linek a jejich pokožka byla hladší, pevnější a pružnější. Pleť je omlazená a obličejové skvrny jsou redukovány.

-85% \* Z nich uvedlo, že jejich oči byly jasnější a byly vymazány známky únavy na tváři.

\* Výsledky dosažené po klinické studii provedené u 20 žen ve věku mezi 30 a 60 let při denním provozu po dobu 28 dní.

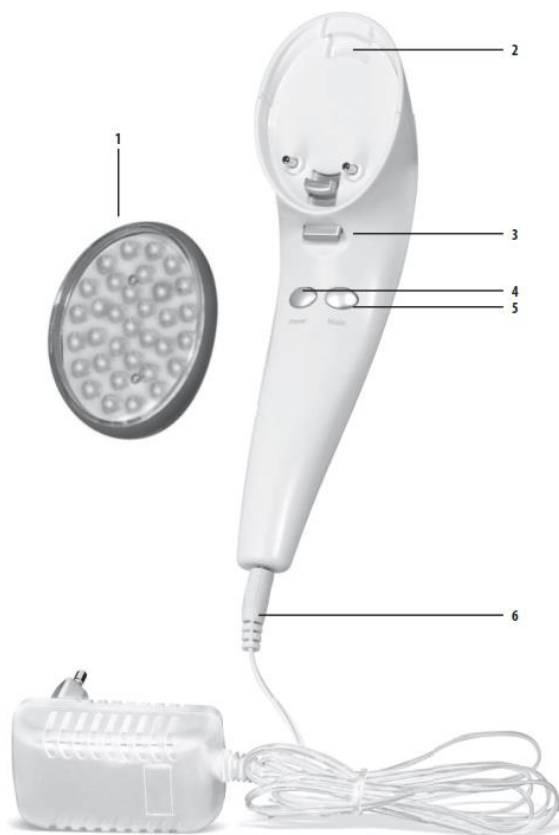

Obr. 1



Obr. 2

Kompaktní a snadno ovladatelný, můžete dosáhnout i v domácím prostředí výsledků jako v kosmetickém salonu. Beauty Light je vhodný pro všechny typy pleti.

**Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si všechny pokyny, především následující základní bezpečnostní informace:**

- Toto zařízení není určeno pro použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, včetně dětí, nebo lidí bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyli poučeni předem o tom, jak zařízení používat, někým odpovědným za jejich bezpečnost. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Používejte toto zařízení pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím zařízení zkontrolujte stav napájecího kabelu. Ujistěte se, že přístroj není nijak poškozen.
- Používejte pouze originální doplňky a příslušenství Lanaform®.
- Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle.
- Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo elektrický transformátor přístroje mokřima rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen obdobným kabelem. K dispozici je u dodavatele nebo dovozce.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen obdobným kabelem. K dispozici je u dodavatele nebo dovozce.
- Před čištěním odpojte zařízení od napájení.
- Nemyjte celou jednotku vodou a neponořujte ji do vody. Postupujte v souladu s pokyny pro čištění v tomto návodu.
- Odpojte přístroj, který spadl do vody, dříve než sáhnete do vody. Přístroj není vodotěsný a nesmí být používán ve vaně nebo sprše!
- Elektrické zařízení by nikdy nemělo zůstat připojené bez dozoru. Odpojte jej, když ho nepoužíváte.
- Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo pod polštářem. Nezakrývejte ho. Nadměrné teplo může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné zranění.
- Jestliže přístroj skladujete v místnosti s rozdílnou teplotou než v místnosti, kde ho budete používat, tak před použitím nechte několik minut přístroj tepelně stabilizovat.
- Tento přístroj nikdy nepoužívejte v místnosti, jejíž teplota přesahuje 40 ° C.
- Neumisťujte oděvy nebo ručníky pod nebo na přístroj.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte toto zařízení k nahrazení léčebných postupů.
- Nepoužívejte tento výrobek před spaním. Světlo má stimulující účinek, který může bránit usnutí.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti sprchy nebo vodovodního kohoutku.
- Pokud máte obavy o vaše zdraví nebo se léčíte, poraďte se s lékařem před použitím tohoto přístroje.
- Udržujte zařízení v pohybu při jeho používání.
- Toto zařízení nepoužívejte po dobu delší než 30 minut. Počkejte mezi každým použitím (24 hodin). Viz níže uvedené pokyny.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení na části těla, která je oteklá nebo zanícená, nebo pokud máte kožní vyrážku.
- Nepokládejte přístroj přímo k vašim očím, když ho používáte v blízkosti očí. Zavřete oči nebo použijte ochranu, pokud jste citliví.
- Pokud se při používání tohoto přístroje objeví nějaká bolest, okamžitě ho přestaňte užívat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte tento přístroj bez konzultace s lékařem v následujících případech: jestliže jste těhotná nebo kojíte, jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy a jste léčeni, jestliže trpíte léčením způsobujícím fotosenzitivitu, máte rakovinu kůže, máte neobvyklé zbarvení kůže, pokud máte nadměrně citlivou pokožku nebo pokud používáte krémy nebo masti aktivující teplo. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem před použitím Beauty Light.

## Části přístroje (viz obr. 1 na začátku návodu k použití)

- (1) Vyměnitelná LED hlavice (červená a zelená)
- (2) Základna LED hlavy
- (3) Tlačítko pro odpojení hlav
- (4) Tlačítko napájení (zap / vyp)
- (5) Volba režimu
- (6) Elektrická zástrčka a napájecí zástrčka

## Návod k obsluze

### Použití

1. Před zahájením ošetření obličeje se ujistěte, že je kůže a krk čistá a suchá.  
Pozn.: Chcete-li léčbu zvýšit účinnost, doporučujeme předem použít svůj obvyklý krém proti stárnutí.
2. Zvolte hlavu, kterou chcete použít, abyste dosáhli požadovaného efektu. Držte rukojeť pevně a zatlačte na hlavu, dokud neuslyšíte "kliknutí". Začněte tím, že zatlačíte horní část hlavy (viz obr. 2).
3. Zapojte přístroj do sítě.
4. Přímou umístěte světlo do kontaktu s obličejem podle následujících pokynů:

Doporučujeme následující postup, abychom zaručili optimální výsledky.

Během prvních osmi týdnů zařízení používejte 24 minut denně: 9 minut v režimu "puls" a 15 minut v režimu "konstantní". Poté použijte každé 2-3 dny. Můžete postupně aplikovat dvě ošetření denně se dvěma různými hlavami.

### Fáze 1: Impulsní režim (kontrolka bliká)



1. Rozdělte obličej na tři části (schéma a). Použijete zařízení postupně na těchto třech částech.

2. Stiskněte tlačítko "0/I" a tlačítko "Režim" pro výběr impulsního režimu (kontrolka bliká).

3. Spusťte léčbu postupně přes tyto tři části:

Krk (obr. b): suňte zařízení ze spodu do horní části krku pomocí pomalých kruhových pohybů.


Líce (obr. c): položte zařízení na roh vašich rtů a posuňte se na tvář a pohybujte se směrem k uším.

Pokračujte až na vrchní část lícních kostí. Opakujte, pohybujte se doprava a doleva.

Čelo (obr. d): umístěte přístroj mezi obočí a posuňte ho nahoru. Přesuňte zařízení doprava a doleva.

Poznámka: Každou část ošetřujte 3 minuty, tj. celkem 9 minut.

### Fáze 2: Konstantní režim (kontrolka nesvítí)

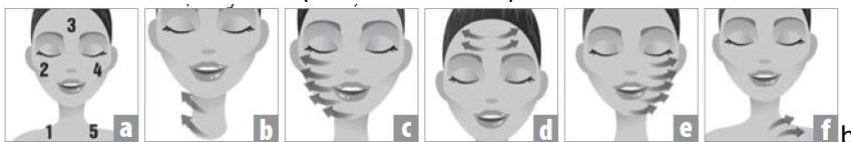

1. Tentokrát rozdělte tvář na 5 částí (obr. a).

2. Opět stiskněte tlačítko "Mode". Světlo už bliká.

3. Spusťte ošetření, postupně se přesunete do 5 částí:

Levá strana krku (obr. b): posuňte zařízení ze spodu do horní části krku pomocí pomalých kruhových pohybů.

Levá tvář (obr. c): položte zařízení na roh vašich rtů a posuňte se na tvář a pohybujte se směrem k uším. Pokračujte až na vrchní část lícních kostí.

Čelo (schéma d): umístěte přístroj mezi obočí a posuňte ho nahoru. Přesuňte zařízení doprava a doleva.

Pravá tvář (obr. e): umístěte zařízení do rohu vašich rtů, tentokrát na pravé straně a posuňte se na tvář a pohybujte se směrem k uším. Pokračujte až na vrchní část lícních kostí.

Pravá strana krku (obr. f): posuňte přístroj ze spodní části krku na pravou stranu.

Poznámka: Každou část ošetřujte 3 minuty, celkem 15 minut.

Poznámka: Chcete-li změnit typ ošetření, jednoduše stiskněte tlačítko pro odpojení hlavy a vyměňte ji za jinou.

### **Údržba a skladování**

#### **Údržba**

Odpojte napájecí zdroj.

Po použití utřete každou hlavu hadříkem lehce namočeným v alkoholu.

Nepokládejte hlavy pod vodu, abyste je vyčistili!

#### **Skladování**

Po vyčištění a vysušení zařízení uložte na suché místo mimo dosah dětí.

### **Rady z oblasti likvidace obalů**

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

### **Omezená záruka**

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací. Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv. Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody. Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží. Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.

Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

### **Distributor:**

CM Trade Via, s.r.o.

Jundrovská 618/31, 62400 Brno

Tel.: +420 549 274 164, e-mail: [info@cm-trade.cz](mailto:info@cm-trade.cz)

Verze: 2024-02