




AMAZFIT

Uživatelská příručka

Před použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí využití.

## Přehled zařízení

---

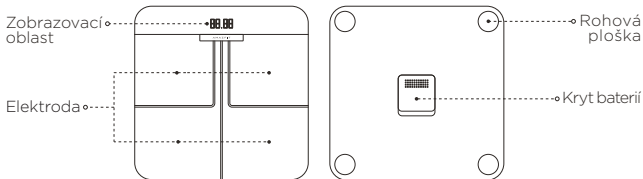

## Instalace aplikace

---

Naskenováním QR kódu dole si stáhněte aplikaci Zepp (dále zde nazývaná jen jako „aplikace“) nebo si najdete „Zepp“ v obchodě s aplikacemi a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

Poznámky:


1. Pro co nejlepší výsledek proveďte na vyžádání aktualizaci aplikace na nejnovější verzi.
2. Systém je kompatibilní s verzemi Android 5.0 nebo iOS 10.0 a novějšími.



## Vložení baterií

---

Otevřete kryt baterií a vložte čtyři baterie typu AAA ve směru označeném uvnitř přihrádky baterií.

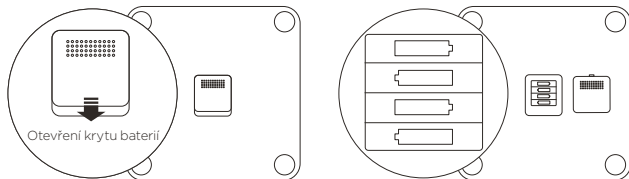

## Spárování váhy

---

Otevřete aplikaci Zepp, zaregistrujte se nebo se přihlaste na svůj účet, poté spárujte váhu se svým účtem a zadejte své osobní údaje podle pokynů na obrazovce.

Po spárování váhy se můžete v aplikaci podívat na záznamy o vážení a na informace o tělesné kompozici.

Osobní údaje slouží k analýze vaší tělesné kompozice. Pro zajištění přesnosti výsledků zadejte přesné osobní údaje.

## Konfigurace Wi-Fi

---

Na požádání klikněte po prvním spárování na položku Konfigurace Wi-Fi, vyberte připojení Wi-Fi, zadejte heslo a počkejte na dokončení konfigurace.

Poznámky:

1. Váha podporuje jen Wi-Fi připojení 2,4 GHz, nikoli Wi-Fi připojení 5 GHz.
2. Pokud chcete nakonfigurovat Wi-Fi později, můžete tak učinit, když otevřete aplikaci, stoupnete si na váhu, aby došlo k připojení aplikace, kliknete na položku Konfigurace Wi-Fi, vyberete připojení Wi-Fi a zadáním hesla dokončíte konfiguraci.

## Zahájení měření


---

Položte váhu na tvrdou, rovnou podlahu.

Bosýma nohama si stoupněte na váhu, jak je vidět na obrázku. Dbejte, aby kůže na nohou byla v dobrém kontaktu se čtyřmi elektrodami na váze.

Po změření hmotnosti váha zahájí výpočet vaší tělesné kompozice, například podílu tuku v tele, tepové frekvence.



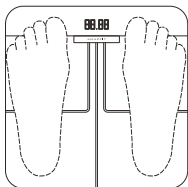











Během měření se vám postupně zobrazují na obrazovce typy informací měřené váhou. Po skončení měření a synchronizaci údajů si můžete prohlédnout detaily v aplikaci.



Poznámky:

1. Údaje o tělesné kompozici poskytované touto váhou slouží jen pro informaci a nemají význam lékařské rady.
2. Pohyby váhy nebo nárazy na ni mohou ovlivnit přesnost, v takovém případě se zvažte znovu, aby byla zajištěna přesnost.

## Zobrazované značky

	Wi-Fi		Vypnout měření složení těla
	Bluetooth		Hodnota tělesného tuku
	Hmotnost svaloviny		Procenta vody v těle
	Procenta tuku		Hmotnost kostí
	Hodnota útrobního tuku		Bazální metabolismus
	Podkožní tuk		Kosterní svaly
<b>BMI</b>	BMI		Fyzický věk
	Tepová frekvence	<b>OL</b>	Nadváha

## Výběr jednotek hmotnosti

Ve výchozím stavu váha počítá hmotnost v kilogramech (kg). Jednotky hmotnosti váhy můžete změnit v nastavení zařízení v aplikaci.

Váha umí zobrazovat hmotnost v kilogramech (kg), librách (lbs) a kamenech (st).

## Upozornění

---

1. Váhu nesmí používat osoby s kardiostimulátorem nebo jinými implantovanými zdravotními pomůckami.
2. Aby nedocházelo k uklouznutí, nepokládejte váhu na kluzkou podlahu a nepoužívejte ji, pokud je mokrá nebo pokud máte mokré nohy.
3. Vždy si stoupejte doprostřed váhy, aby se během vážení nešťastnou náhodou nepřevrátila.
4. Používejte váhu pouze v suchém prostředí a neponořujte ji do vody.
5. Vyčistěte váhu otíráním vlhkým hadrem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte organická rozpouštědla, ani jiné chemikálie.
6. Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí riziko exploze. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.
7. Po vybití baterie ihned vyjměte, aby nedošlo k jejich případnému vytečení a korozi.
8. Těhotným ženám se použití nedoporučuje. Pro těhotné ženy, prosím, před vážením vypněte měření složení těla.
9. Profesionální atleti a lidé, kteří pravidelně cvičí, by měli pro vážení používat „Sportovní režim“.
10. Nevažte se, pokud se necítíte dobře (horečka, průjem, opilost), pokud trpíte extrémní dehydratací, po použití sauny nebo po koupeli v termálním pramenu nebo po intenzivním cvičení.
11. Změřené údaje o tělesné kompozici se mohou lišit pro osoby, které mají v těle kovové předměty, pro osoby které užívají medikamenty vyvolávající zadržování vody v těle, pro osoby se silnou pokožkou chodidel a pro určité další osoby se zvláštními podmínkami.

## Informace o likvidaci a recyklaci

---



Všechny produkty s tímto symbolem spadají do odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být směřován s netříděným domácím odpadem. Namísto toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že předáte odpadní zařízení do určeného sběrného místa stanoveného vládami nebo místními úřady pro účel recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace a recyklace pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. obraťte se na instalační firmu nebo na místní úřady, kde se dozvíte další informace a podmínky ohledně těchto sběrných míst.

## Certifikace a bezpečnostní schválení

---



Společnost Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu A2003 vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://en.amazfit.com/support.html>



## Technické údaje

---

Název: Amazfit Smart Scale

Model: A2003

Jednotky hmotnosti: kg / lb

Rozměry: 320 x 320 x 25 mm

Přírůstky: 0,1 kg / lb

Čistá hmotnost: 2,2 kg

Frekvence Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz

Rozsah vážení: 5 kg - 180 kg

Max. výkon Wi-Fi: < 20 mW

Frekvence Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Max. výkon Bluetooth: < 3 mW

Bezdrátová konektivita: 2,4 GHz 802.11 b/g/n Wi-Fi, 2,4 GHz Bluetooth 5.0

Provozní teplota: 5 °C - 40 °C

Zdroj napájení: 6V  (4 x 1.5 V AAA)

Materiál pouzdra: Tvrzené sklo, technický plast ABS

Kompatibilita: Android 5.0 nebo iOS 10.0 a novější

Obsah balení: Amazfit Smart Scale, uživatelská příručka

## Záruka a vrácení zboží

---

Omezená záruka Amazfit pokrývá produkty Amazfit v souvislosti s výrobními vadami počínaje datem původního nákupu. Trvání záruční doby je 12 měsíců nebo i jiná délka, jestliže tak vyžadují platné spotřebitelské zákony v zemi nákupu zákazníka. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony.

Oficiální webové stránky: [en.amazfit.com](http://en.amazfit.com)

Nápověda: [support.amazfit.com](mailto:support.amazfit.com)

**Dovozce:**  
**Beryko s.r.o.**  
Pod Vinicemi 931/2,  
301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)