

MASSAGE GUN MB5 MINI

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA **ČESKY**



Model: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU

25 W

Powerful
Brushless Motor

Only
35dB

Active
Lower noise




Light weight
and Compact



C-Type
Rechargeable

PŘEHLED PRODUKTŮ

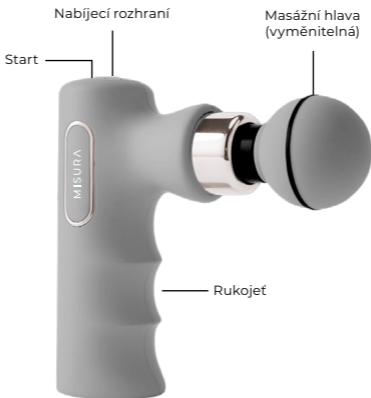

SEZNAM VÝROBKŮ

- 1x | Příklad
- 1x | Nabíjecí kabel typu C
- 1x | Pokyny
- 1x | Spirální hlava
- 1x | Kulová hlava
- 1x | Plochá hlava
- 1x | Vidlicová hlava

PARAMETRY PRODUKTU

Model: MB5 MINI massage Gun

Jmenovité napětí: 7.4v

Jmenovitý proud: 2A


Jmenovitý výkon: 25W

Vstupní parametr: 5V  2A

Maximální rychlost: 3200r/min

Kapacita baterie: 800mAh


POUŽITÍ VÝROBKU

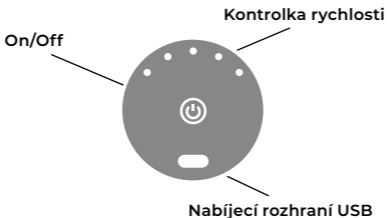

On/Off

Podržte tlačítko  po dobu tří sekund, aby se přístroj zapnul

Podržením tlačítka  na tři sekundy přístroj vypnete


Kliknutím na tlačítko  nastavíte rychlost

Maximální rychlost je pět


Výchozím rychlostním stupněm je nejnižší rychlostní stupeň

Poznámka: abyste ochránili kosti a svaly, vyhněte se dlouhodobé masáži v jednom bodě, která by vedla k poškození.

POUŽITÍ MASÁŽNÍCH HLAVIC

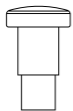


Aplikujte
na všechny
části těla

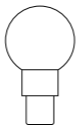

Aplikujte
na velké
svalové skupiny




Aplikujte na
všechny klouby
v těle

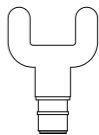

Aplikujte
kolem
páteře

VÝMĚNA MASÁŽNÍ HLAVICE

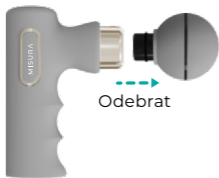

Odebrat




nainstalovat



instalace je
dokončena

NABÍJENÍ

Když je energie nižší než 5 %, indikátor začne blikat.
V této době by se měl přístroj zapojit do nabíječky.

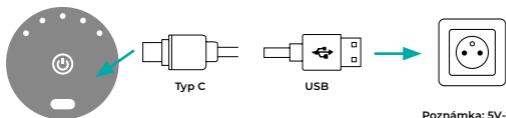

Poznámka: 5V-2A
(standardní nabíječka pro telefon)

- Před prvním použitím se ujistěte, že je plně nabitý
- Indikátor při nabíjení bliká a při nabití svítí stále
- Doba nabíjení je přibližně 4 hodiny
- Pro zajištění bezpečnosti používání nepoužívejte masážní pistoli při nabíjení
- V zájmu ochrany životnosti baterie nečekejte, až se baterie vybije

INDIKACE

- Bolest a křeče způsobené pohmožděním, podvrtnutím a namožením svalů
- Pro rychlejší regeneraci otoků
- Volná a ztlustělá pojivová tkáň a fascie
- Snížení hromadění kyseliny mléčné ve svalech
- Zvýšení pohyblivosti kloubů
- Odstranění svalové únavy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob, musí být tento produkt používán podle následujících pokynů.

- Použití pouze pro dospělé.
- Používejte pouze na suchý čistý povrch těla přes oděv mírným přitlačením a pohybem po těle po dobu přibližně 60 sekund v každé oblasti.
- Masážní zařízení používejte podle potřeby pouze na měkkou tkáň těla, aniž byste si způsobovali bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte přístroj na hlavu ani na tvrdé nebo kostnaté oblasti těla.
- Používejte pouze hlavice, které poskytují nejlepší požadovaný efekt na konkrétní svalovou partii.
- K modřinám může dojít bez ohledu na nastavení ovládání nebo aplikovaný tlak. Často ošetřované oblasti kontrolujte a okamžitě zastavte při prvních známkách bolesti nebo nepohodlí.
- Udržujte prsty, vlasy nebo jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od hřídele a zadní části aplikátoru, protože by mohlo dojít ke skřípnutí.
- Do větracích otvorů masážního zařízení nevkládejte žádné předměty.
- Neponořujte zařízení do vody a nedovolte, aby voda vnikla do ventilačních otvorů masážního zařízení.
- Chraňte zařízení před pádem nebo zneužitím.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte zařízení a baterii. Masážní zařízení žádným způsobem nemanipulujte ani jej neměňte.
- Nikdy nenechávejte masážní zařízení v provozu nebo při nabíjení bez dozoru.

VAROVÁNÍ

- Neponořujte zařízení do vody.
- Chraňte před tekutinami a zdroji tepla.
- Chraňte ventilační otvory před prachem a drobnými předměty.
- Neodstraňujte šrouby ani se zařízení nepokoušejte sami opravit. Jakýkoli zásah do konstrukce výrobku znamená ztrátu záruky na tento výrobek.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle než jednu hodinu.
- Umožněte zařízení odpočinek minimálně 30 minut před dalším použitím.
- Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie zařízení.
- Nezraňte se. V případě nejistoty o vhodnosti používání přístroje se poraďte se svým lékařem.
- Produkt používejte pouze v souladu s návodem k použití, který je k dispozici v manuálu k produktu.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte masážní zařízení ani žádné vibrační zařízení bez předchozího souhlasu svého lékaře, pokud u Vás platí cokoli z následujícího:

Těhotenství, cukrovka s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, srdeční slabost, nedávná operace, epilepsie a migrény, herniované disky, spondylolistéza nebo spondylóza, nedávné náhrady kloubů nebo nitroděložní tělíška, kovové čepy nebo destičky nebo jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví. Křehké jedince nebo děti by při použití jakéhokoli vibračního zařízení měla doprovázet dospělá osoba. Tyto kontraindikace neznamenají, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební zařízení, ale nejprve se

poradte s lékařem. Probíhající výzkum účinků vibračního cvičení na konkrétní lékařské poruchy pravděpodobně povede ke zkrácení seznamu kontraindikací uvedených výše. Praktické zkušenosti ukázaly, že integrace vibračních cvičení do léčebného plánu je v několika případech doporučena. Cvičení musí být provedeno na radu lékaře a za jeho asistence, případně jiného specialisty nebo fyzioterapeuta.

ZÁRUKA

Záruka běží od okamžiku nákupu. Pokud dojde k poruše produktu z důvodu vad materiálu nebo konstrukčního procesu do 24 měsíců, společnost bezplatně opraví nebo vymění díly nebo vymění nové produkty, s výjimkou následujících případů:

- Nesprávné použití nebo poškození zařízení způsobené přepravou.
- Neoprávněná demontáž nebo oprava tohoto zařízení.
- Nedodržení pokynů užití.
- Produkt je poškozen v důsledku neobvyklého prostředí skladování nebo údržby zákazníka.
- Pokud nebude poskytnut doklad o zakoupení, společnost si vyhrazuje právo odmítnout záruku.

PRÁVNÍ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Pokud trpíte některými obtížemi uvedenými v odstavci Upozornění, vždy konzultujte použití výrobku MISURA MB5 MINI se svým lékařem. Společnost MISURA Store s.r.o. není licencovaným poskytovatelem zdravotní péče a prohlašuje, že nemá žádné odborné znalosti v diagnostice, zkoumání nebo léčení zdravotních stavů jakéhokoli druhu nebo při určování účinku jakéhokoli konkrétního cvičení nebo terapie na zdravotní stav. Při účasti na jakémkoli cvičení nebo terapii existuje možnost fyzického zranění. Pokud se zapojíte do tohoto cvičení nebo terapie, souhlasíte s tím, že tak činíte na své vlastní riziko, dobrovolně se účastníte těchto aktivit a tím přebíráte veškerá rizika zranění na sebe. Tím také souhlasíte se zproštěním jakýchkoli nároků známých i neznámých vůči společnosti MISURA Store s.r.o. vyplývajících z nedbalosti či nesprávného používání produktu.

Musíte být starší 18let. Pokud pocítíte silnou bolest nebo nepohodlí, okamžitě zařízení přestaňte používat. Jakýkoli cvičební program, včetně tohoto, může mít za následek zranění. Před zahájením tohoto případně jakéhokoli cvičebního nebo terapeutického se poradte s lékařem. Výrobci, distributoři, dodavatelé a prodejci se zříkají jakékoli odpovědnosti za jakékoli ztráty ve spojení s informacemi, ukázkami cvičení nebo instrukcemi zde uvedenými.


Copyright© 2024. MISURA Store s.r.o. 24-měsíční omezená záruka.
Platnost smluvních podmínek.



Děkujeme vám za váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na adrese:

Výrobce / Dovozce

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

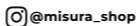

Za tiskové chyby neručíme.