

GIO-351

innoGIO



GIOmum Line Simple

Elektrická odsávačka mateřského mléka

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili GIOmumLine Simple, která nabízí příjemný a diskrétní způsob odsávání mateřského mléka. GIOmumLine Simple byla navržena tak, abyste ji mohli používat kdykoli a kdekoli. Je malá, lehká a snadno přenosná.


- elegantní a kompaktní design
- tichý a pohodlný provoz
- snadné použití
- efektivní odsávání mléka
- ideální pro použití doma nebo v kanceláři
- snadno se sestavuje a čistí

GIOMumLine Simple je vysoce kvalitní uzavřený systém. Všechny části, které přicházejí do styku s mateřským mlékem, neobsahují BPA, BPS, ftaláty, ani PVC. Umožňuje rychle a efektivně odsávat mateřské mléko podle vašich potřeb. Montáž je jednoduchá; všechny díly lze rozebrat pro snadné čištění a sterilizaci ve vroucí vodě.


Důležité upozornění

- Před sestavením dílů používaných k odsávání mléka si umyjte ruce jemnou mýdlovou vodou a důkladně je osušte.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny části odsávačky jsou čisté a suché.
- Tento produkt je předmětem osobní péče a neměl by být sdílen mezi matkami.
- Pokud pociťujete při používání nějakou bolest, vyhledejte odbornou radu od laktační poradkyně, abyste měli jistotu, že používáte správně zvolenou velikost prsního košíku.
- Pokud se vám nepodaří odsát mléko, nepokračujte v odsávání déle než pět minut.
- Před sejmutím odsávačky z prsu ji vypněte.
- Vyvarujte se drsným čistícím prostředkům a tvrdým drátěnkám nebo houbičkám, protože by mohly produkt poškrábat a poškodit.
- Použití UV sterilizátorů se nedoporučuje, protože silikonové díly zežloutnou a zkrátí životnost dílů nebo je poškodí.
- Na čištění ventilu nepoužívejte žádný čistící kartáček, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Aby bylo zajištěno dobré sání, vyměňte ventil po každém měsíci používání nebo dříve, pokud zaznamenáte známky opotřebení nebo poškození.
- Vyměňte všechny ostatní díly odsávačky při známkách opotřebení nebo slabosti nebo po 3 měsících používání.
- Díly skladujte na chladném a suchém místě, nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
- Nečistěte ani neponořujte motor odsávačky a/nebo nabíjecí kabel do vody.
- K dobíjení baterie používejte pouze 5V / 1-3A nabíječku s USB-C kabelem.
- Nenabíjejte jednotku déle než 24 hodin, protože by dojít k trvalému poškození nebo by to mohlo způsobit bezpečnostní riziko.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.

POPIS ČÁSTÍ

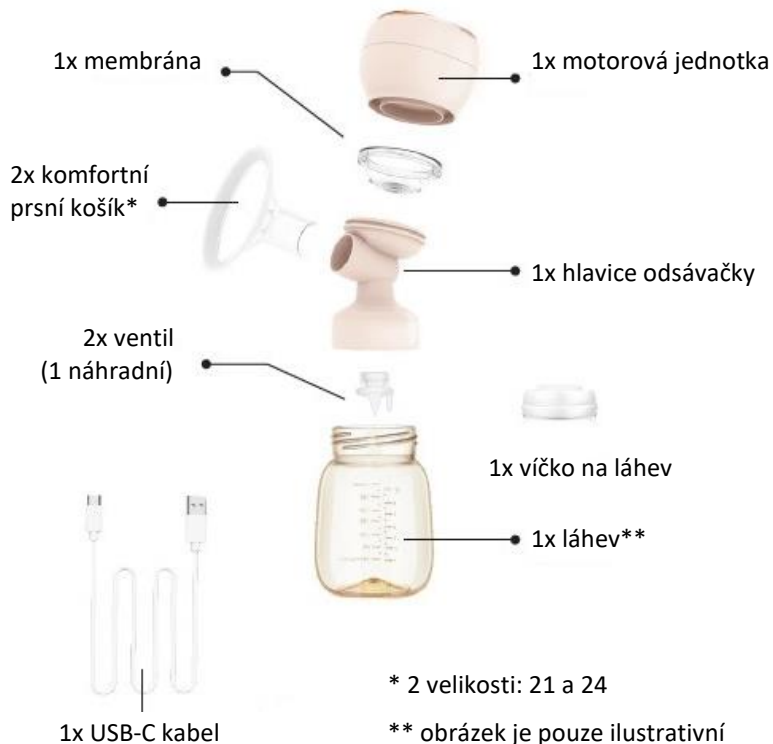

DISPLEJ

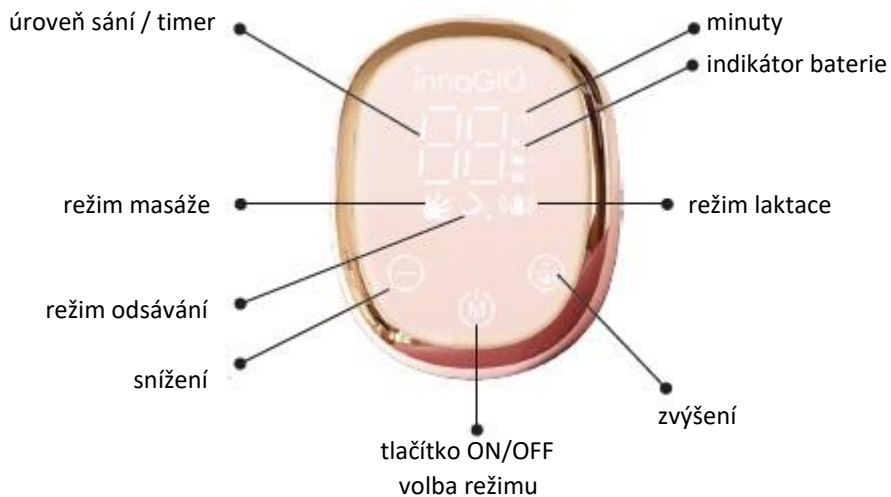

STAV BATERIE



baterie je plně nabitá



baterie je nabitá na cca 30-60%



nízká úroveň nabití

blikání



baterie je vybitá, před použitím odsávačku nabijte

Důležité: Nenabíjejte odsávačku déle než 24 hodin – mohlo by dojít k poškození přístroje.

NABÍJENÍ

Chcete-li odsávačku nabít a předejít poškození baterie, připojte kabel USB-C k nabíječce pouze s napětím 5V a proudem mezi 1A a 3A (5V/1A, 5B/2A, 5V/3A). K nabíjení lze použít většinu běžných nabíječek na telefony, tablety a powerbanky.

V případě potřeby otřete motorovou jednotku nebo nabíječku měkkým navlhčeným hadříkem, když je motorová jednotka vypnutá a nabíječka je odpojena od elektrické zásuvky. Neponořujte motorovou jednotku ani nabíječku do vody nebo dezinfekčního prostředku. Před prvním použitím a po každém dalším použití vyčistěte a sterilizujte všechny ostatní části odsávačky, které přicházejí do styku s mateřským mlékem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

1. Před prvním použitím

- Demontujte všechny díly a omyjte je v teplé mýdlové vodě.
- Pořádně je vypláchněte.
- Části (kromě motorové jednotky a kabelu) ponořte do hrnce s vodou a vařte 3-5 minut
- Použijte velký hrnec, aby se části nedotýkaly stěn nebo dna hrnce.
- Okapejte přebytečnou vodu a nechte vysušit na stojanu nebo čisté utěrce.

2. Po každém použití

- Demontujte všechny díly (membránu, základnu ventilu, ventil, prsní košík a láhev). Odložte části, které nepřicházejí do styku s mateřským mlékem (motorová jednotka, nabíječka).
- Co nejdříve po použití opláchněte části studenou vodou, abyste odstranili mateřské mléko.
- Umyjte je v teplé mýdlové vodě. Ventily můžete vyčistit jemným promnutím mezi prsty.
- Pořádně vypláchněte.
- Okapejte přebytečnou vodu a nechte vysušit na stojanu nebo čisté utěrce.

3. Jak sterilizovat

- Dodržte pokyny pro čištění uvedené v bodě 2.
- Části ponořte do hrnce s vodou a vařte 3-5 minut.
- Použijte velký hrnec, aby se části nedotýkaly stěn nebo dna hrnce.
- Okapejte přebytečnou vodu a nechte vysušit na stojanu nebo čisté utěrce.



Důležité: Ventily jsou velmi jemné a lze je snadno poškodit. Z tohoto důvodu do nich nevkládejte žádné čisticí kartáčky. Zacházejte s nimi opatrně a často je vyměňujte.

Jak změřit a zjistit velikost prsního košíku

Zatlačte bradavku tak, aby se postavila, a změřte průměr (nebo šířku) základny bradavky. Nezahrnujte dvorec.

Dobře padnoucí prsní košík je důležitý jak pro pohodlí a bezpečnost, tak i pro účinnost odsávání.

Doporučená velikost pro začátek je přibližně o 3-4 mm větší než průměr základny bradavky.

Dalším faktorem je, jak se cítíte a zda máte při odsávání nějaké nepohodlí nebo pociťujete bolest.

Do prsního košíku by měla být vtažena pouze bradavka, nikoli dvorec.

Pokud se vaše bradavka při odsávání mléka tře o strany tunelu prsního košíku, je pravděpodobně příliš malý. Pokud je váš dvorec vtažen do tunelu prsního košíku, použijte větší velikost košíku.


Pokud máte obavy nebo pochybnosti, je důležité požádat o radu laktačního poradce.

..



Bradavku změřte ještě před odsáváním.

Pokud jste bradavku měřili během těhotenství, je důležité ji změřit znovu před zahájením odsávání, protože velikost vaší bradavky se může po porodu mírně změnit.

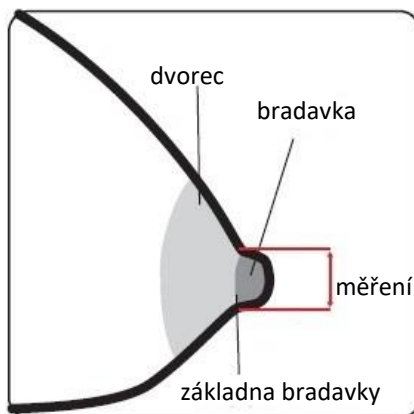

Velikost bradavky	Velikost prsního košíku
do 17 mm	21
do 20 mm	24
do 23 mm	27
do 26 mm	30
do 32mm	36

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

1. Umyjte si ruce jemnou mýdlovou vodou a důkladně je osušte, aby nedošlo ke kontaminaci mléka.



2. Vložte prsní košík do hlavičky odsávačky.
Vhodnou velikost prsního košíku zjistíte dle postupu výše.



3. Do spodní části hlavičky základny vložte opatrně ventil.



4. Našroubujte hlavičku ve směru hodinových ručiček na lahvičku.

5. Umístěte silikonovou membránu shora do hlavičky odsávačky. Ujistěte se, že je membrána správně a rovnoměrně nasazena.






Ujistěte se, že je membrána zcela suchá, aby nedošlo k poškození jednotky motoru.

6. Připevněte motorovou jednotku k základně zatlačením na membránu.

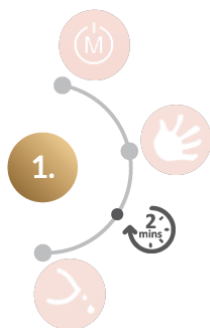

POUŽITÍ




1. Dlouhým stisknutím  odsávačku zapnete. Na 2 minuty se spustí masážní režim a poté se automaticky přepne na režim odsávání. Pokud se vám mléko spustí dříve, stisknutím tlačítka  můžete ručně přepnout do režimu odsávání.

Stisknutím tlačítek +/- vyberte úroveň, která je pro vás nejpohodlnější.

Každý režim má 10 úrovní (od 0 do 9).



3. Stisknutím tlačítka  vyberte smíšený režim: rozsvítí se indikátory režimu masáže i odsávání.


Smíšený režim přepíná mezi masážním režimem a odsáváním.

Smíšený režim

Úroveň	Schéma smíšeného režimu (Pozn: Ve smíšeném režimu zůstávají příslušné úrovně obou režimů na dříve zvolené úrovni)
0	1x masáž, 1x sání (opakování)
1	2x masáž, 1x sání (opakování)
2	3x masáž, 1x sání (opakování)
3	4x masáž, 1x sání (opakování)
4	5x masáž, 1x sání (opakování)
5	6x masáž, 1x sání (opakování)
6	7x masáž, 1x sání (opakování)
7	8x masáž, 1x sání (opakování)
8	9x masáž, 1x sání (opakování)
9	10x masáž, 1x sání (opakování)

Odsávačka se automaticky vypne po 30 minutách. Doporučuje se odsávat maximálně 30 minut.

Laktační masáž

Je-li odsávačka vypnutá, dlouhým stisknutím  aktivujete masážní laktační masáž.

Krátkým stisknutím zvolíte preferovaný masážní režim - AU nebo P + L (osobní nastavení vibračního režimu a úrovně).

AU = automatická masáž, úroveň je přednastavena

P = vibrační režim

P0-P2 = krátké vibrace

P3-P5 = krátké a dlouhé vibrace (smíšený cyklus)

P6-P9 = vysoké vibrace

L0-L9 = vibrační úroveň


Síla vibrací se zvyšuje s vyšší úrovní.

Odsávání s režimem laktační masáže

Během odsávání dlouhým stisknutím  zapnete nebo vypnete masážní režim.



Poznámka: Během odsávání mléka nemůžete změnit funkci laktační masáže;

 lze jej pouze zapnout nebo vypnout.

Motorovou jednotku můžete vyjmout a použít jako laktační masážní přístroj. Můžete to také použít ke zmírnění překrvení, mastitidy, ucpaných kanálků a ke zlepšení toku mléka.



MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problém	Řešení
Neefektivní odsávání	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte polohu ventilu a zda je správně zajištěn.- Zkontrolujte stav ventilu a vyměňte jej, pokud je opotřebovaný.- Nainstalujte dodané náhradní ventily, pokud ještě nebyly použity.- Zkontrolujte doporučení pro výběr velikosti prsního košíku.
Bolest bradavek / dvorců	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte doporučení pro výběr velikosti prsního košíku.- Poradte se s laktační poradkyní.- Na zotavení lze použít balzám na bradavky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Input: 100-240V – 50/60 Hz

Output: 5 V  1A

Lithiová baterie: 3.7V 1800mAh

Sací síla: 38 – 270 mmHg

Automatické vypínání: po 30 minutách

Podmínky pro provoz: 10-30°C, RH 15%-93%, 70-106 kPa

Podmínky pro skladování: -25-50°C, RH 15%-93%, 70-106 kPa

Děkujeme, že jste si zakoupili InnoGIO výrobek!

Abyste mohli produkt dobře a dlouho používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Obrázky jsou pouze ilustrativní.

innoGIO

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

